


使用テスト

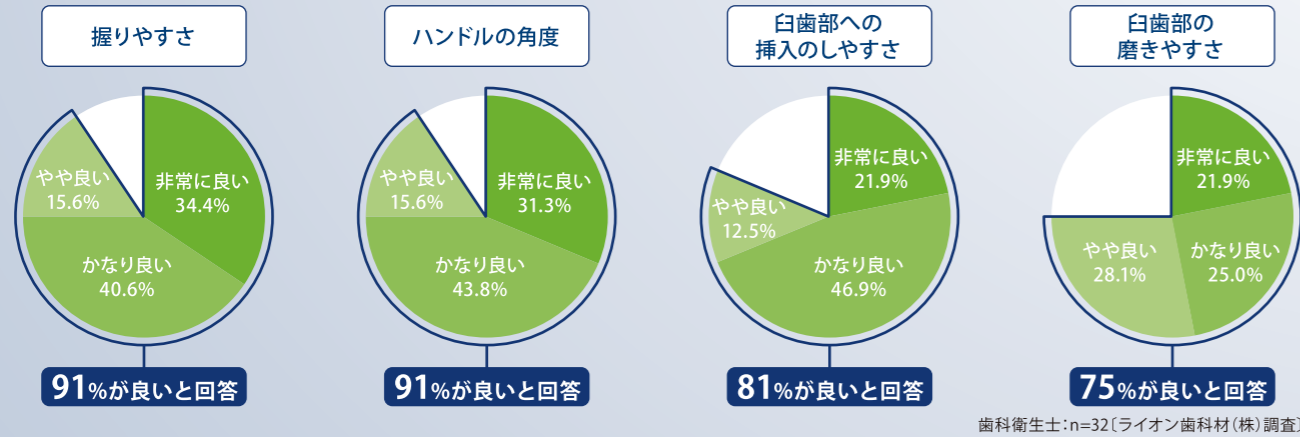

歯科衛生士：n=32(ライオン歯科材(株)調査)

歯科衛生士さんの声

L字型の持ち手で、  
ブラシがやわらかく、ゴム  
タイプのノンワイヤーは  
非常に良さそう。

インプラントOpeを  
当院で受けた方が、かなりい  
らっしゃるので、安心して使っ  
て頂けるIDBがないかと  
気にしていた。

ブラシは細かい突  
起がついていて、歯垢  
がとりやすそう。

使い方はホームページで

ライオン歯科材ホームページにて、  
歯間ブラシの使い方動画を公開して  
います。ぜひご利用ください。



DENT. EX 歯間ブラシ ノンワイヤー  
NON WIRE S~M  
エス~エムタイプ



DENT.EX 歯間ブラシ NON WIRE S~M  
(4本入/各携帯用キャップ付)



DENT.EX 歯間ブラシ NON WIRE 院内指導用 S~M  
(40本入/各携帯用キャップ付)



携帯に便利なキャップ付

患者様指導用に、ブラシ(キャ  
ップ付)が1本ずつ個包装された  
院内指導用(40本入)をご利用  
ください。



材質	ハンドル	キャップ	ブラシ	耐熱温度
	ポリプロピレン	ポリプロピレン	TPS	80°C

入数・価格	DENT.EX歯間ブラシ NON WIRE S~M	DENT.EX歯間ブラシ NON WIRE 院内指導用 S~M
入数	4本	40本
内装入数	10個	—
メーカー希望 患者様向け価格/個	500円	—

※価格に消費税は含まれておりません。

DENT. EX 歯間ブラシ ノンワイヤー  
NON WIRE S~M  
エス~エムタイプ



# ゴムタイプの歯間ブラシで 歯垢をしっかりと落とす。

NON WIRE  
×  
CLEANING

## 歯間ブラシでプラークコントロール


歯間ブラシは、歯ブラシの毛先が届かない歯間部のプラークコントロールに効果が高いアイテムです。しかし、歯間ブラシの使用率は約35%\*と、まだまだ浸透していないのが現状です。「DENT.EX歯間ブラシ NON WIRE」は、金属ワイヤーを使用しないゴムタイプの歯間ブラシです。110°アングルネックの採用により、臼歯部のインプラントや補綴物にも使用でき、歯間部を効果的にプラークコントロールできます。

\*一般：n=1,600〔2018年 ライオン(株)調査〕


02

## 操作しやすい110°アングルネックハンドル

ブラッシング操作に適した「110°アングルネック」ハンドル。臼歯部にもブラシを曲げずに挿入でき、頬側、舌側のどちらでも高い操作性を実現します。ブラシ部は、耐久性が高く、洗って繰り返し(10回程度)使用できます。

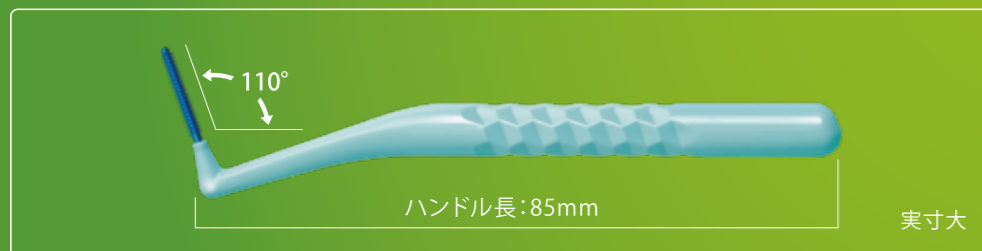

こんなところにもお使いいただけます

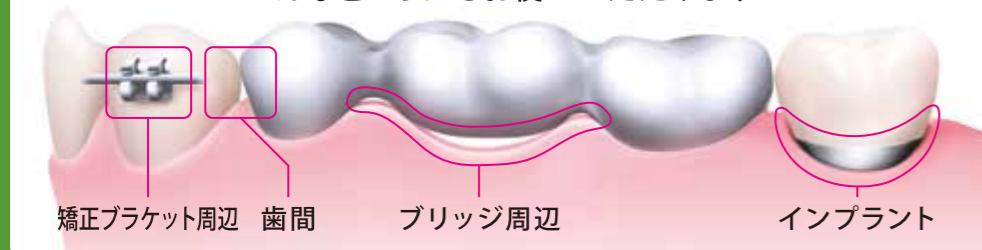


01

DENT. EX 歯間ブラシノンワイヤー

# NON WIRE S~M

エス~エムタイプ

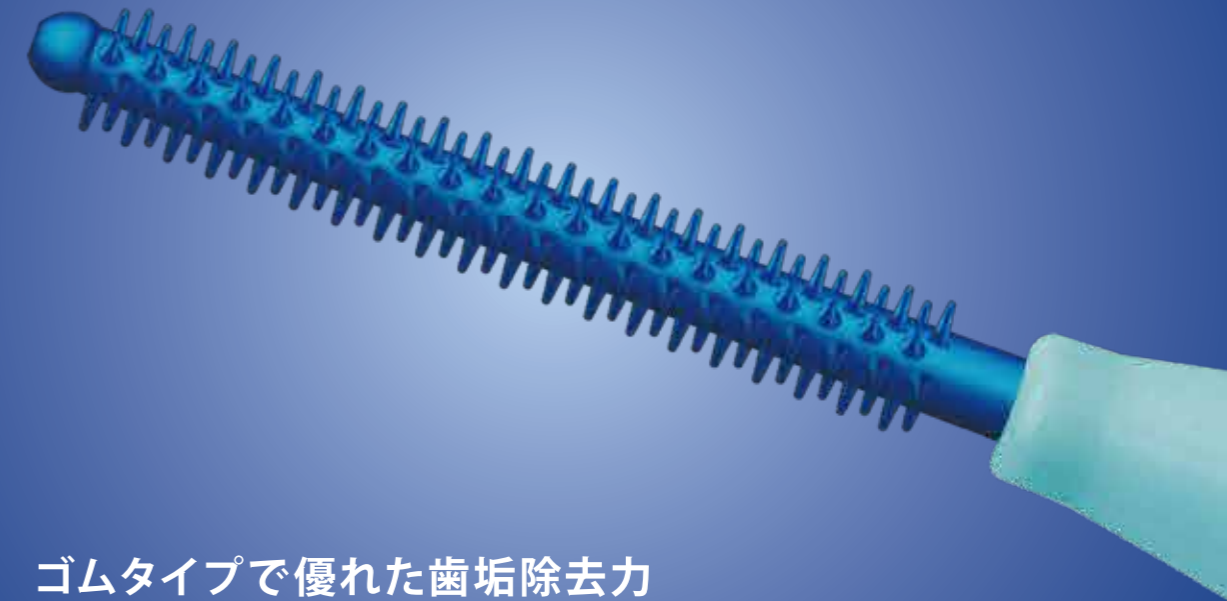


## ゴムタイプで優れた歯垢除去力

金属ワイヤーを使用していないゴムタイプの歯間ブラシです。極小突起を高密度に配置した独自のブラシ仕様で、歯周病やムシ歯の原因となる歯垢の除去力に優れています。インプラントや補綴された方にもお薦めです。

ブラシ部

歯間部に合わせて使用できます。

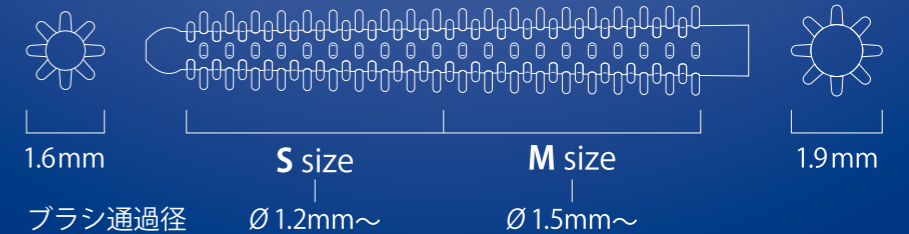

## モデル歯垢清掃力試験

ステンレス穴あき棒にモデル歯垢を附着させ、各歯間ブラシで5往復したときのモデル歯垢の除去率を算出。DENT.EX歯間ブラシNON WIREを100としたときの値。

\*n=5〔ライオン(株)試験〕

