

システム歯ブラシ ラインアップ



Systema

42M / 42H / 44M / 44H

●メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) ￥300



DENT. EX systema **genki f** シリーズ

genki f / genki f / genki j

●メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) ￥400



Systema AX

44M / 44H / 45M

●メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) ￥400



systema **SP-T** 歯ブラシ

●メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) ￥400



製品の詳しい情報につきましては、
ホームページをご覧ください。

<https://www.lion-dent.com/>

ライオン歯科材

検索



ライオン歯科材株式会社

〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28 TEL (03)6739-9012



DENT.

歯科医院様向資料

LION

歯科用

教えて!

システム 歯ブラシ

どんな
歯ブラシ
なんですか?

毛先が
ポイントね!



イラスト：進藤やす子

システムの毛先って
どうなって
いるんですか？


先にいくほど細くなる スーパーテーパード毛

なの！


しかも、
すべての
毛先がね！

先端わずか
約 **0.01** ミリ

超極細毛だから、
歯周ポケットにも
無理なく入り込み
ます。

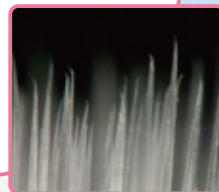

※イメージ図

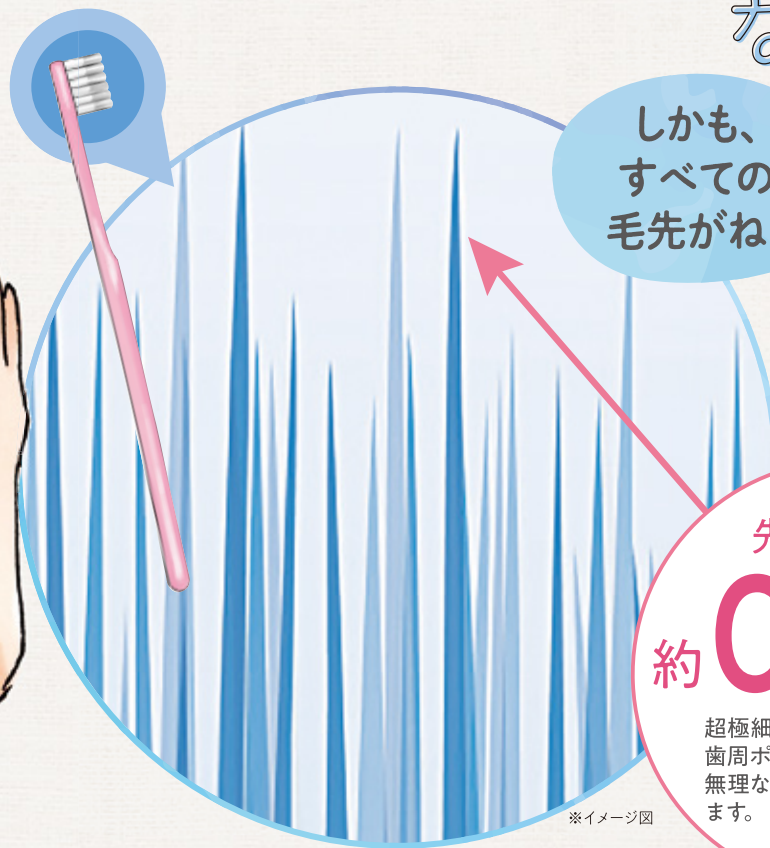



スーパーテーパード毛だと、
何が良いんですか？

大きく分けて

2つあるの！



スーパーテーパード毛 のメリット

Point 1

歯周ポケット・
歯間部・歯頸部に
毛先がよく届く

Point 2

やさしい
磨き心地


Point 1

歯周ポケット・歯間部・歯頸部に
毛先がよく届く


磨き残しがちな
細かい所にも
毛先がよく届くの！



これなら、
すみずみまで、
しっかり磨けますね！

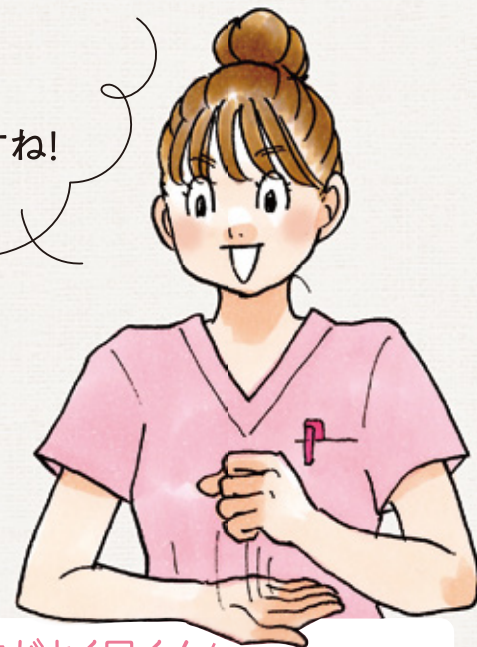

＼ 歯間部・歯頸部に毛先がよく届く！ ／

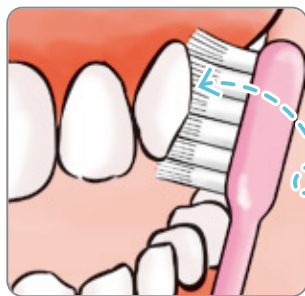

歯間部に
ぴったり
フィット！



歯頸部も
磨き
やすい！



歯肉にあたってても、
やさしくブラッシング
できるの！

歯頸部を
磨くとき
とかね！




歯肉にかかる
ストレスが小さい
ということですね！



歯肉に
やさしく
しっかり
磨ける！



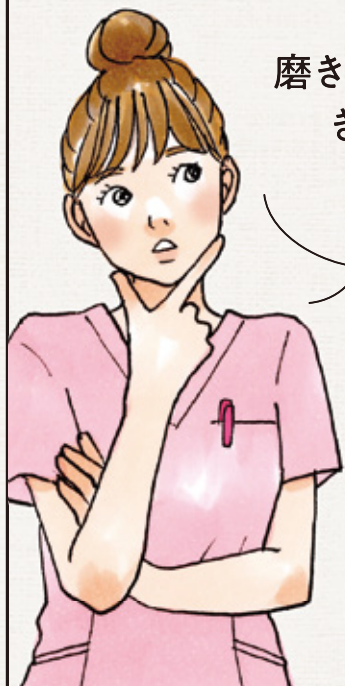

磨き心地がやさしくても、
きちんとプラークが
落ちるんですか？

より刷掃力を高めたい
Hタイプもおすすめ！


同じ用毛で
植毛数が
多い！



Hタイプ
(刷掃力強化タイプ)



根元は普通の太さで、実は
毛腰がしっかり
しているから、
きちんと落ちるの！

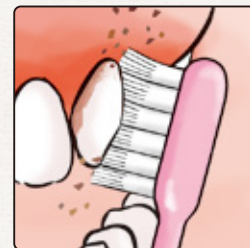

超極細

普通

根元は
普通の太さ

毛先に
行くほど
超極細



※イメージ図



Mタイプ
(スタンダードタイプ)



どんな患者さんに
向いていますか？

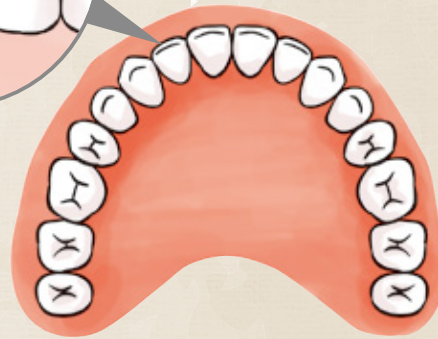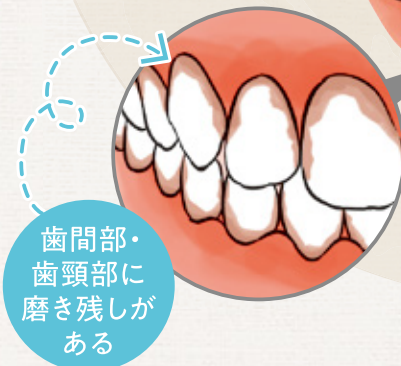

こんな方には、
スーパー
テーパード毛が
おすすめ！





患者さんのお口の状態に
合った歯ブラシを
おすすめしてね！

歯ブラシ選び
フローチャート

歯肉が腫れている
または出血がある

YES

歯面全体に
プラークがある

NO

NO

歯面全体に
プラークがある

YES

NO

これなら、いろいろな
患者さんに
対応できますね！



スーパー
ターバード
毛

Systema

歯肉への
ストレスを抑え、
やさしい磨き心地



Systema 44M

磨き方動画は
こちら

スーパー
ターバード
毛

Systema AX

口腔内すみずみ
までしっかりケア



Systema AX 44M

磨き方動画は
こちら

SPT期には

スーパー
ターバード
毛

Systema SP-T 歯ブラシ

SPT期の
セルフケアに



Systema SP-T

磨き方動画は
こちら

スーパー
ターバード
毛

DENT. EX systema genki
シリーズ

コンパクトヘッド
歯ブラシで上手く
磨けない方に



systema genki

磨き方動画は
こちら

奥歯の
磨き残しがある

NO

ラウンド
毛 **DENT. EX Slimhead II**
歯科用歯ブラシのスタンダード

YES

ラウンド
毛 **DENT. MAXIMA**
最後臼歯部まで楽に毛先が届く