



歯科医院様向資料

LION

歯科用

コンパクトヘッド歯ブラシで上手く磨けない方の幅広ヘッド歯ブラシ

DENT. EX systema genki シリーズ



「DENT. EX systema genki(ゲンキ)」と少し小さなお口の方向けの「genki f(エフ)」。さらに、混合歯列後期からの歯肉炎リスクのある方向けの「DENT. EX systema genki j(ジェイ)」もラインアップ。みがき心地の良さでも選ばれている「genki」シリーズは、様々なシーンで活用の幅が広がっており、多くの支持を頂いております。お口のサイズに合わせてお薦めください。

genki シリーズは、こんな患者様にお薦めください

- コンパクトヘッド歯ブラシで、上手く磨けない方
- 矯正装置をつけている方
- 欠損歯がある方
- 歯周病を主訴される方(歯肉の発赤・腫脹、出血、歯の動揺、口臭など)
- 象牙質知覚過敏の方
- 舌苔のある方
- f** ○お口の小さな方
- 女性の方
- genkiのヘッドでは大きいと感じる方
- j** ○9歳くらいからの歯肉炎リスクのある方
- ブラッシングが苦手な若年層に

カラー



仕様・入数・価格

商品名	歯ブラシ全長(mm)	ヘッドの大きさと植毛配列(実物大)	用毛		内装入数	メーカー希望 患者様向け価格/個
			長さ(mm)	根元太さ*(mm)		
DENT.EX systema genki	190		12	0.19	12個 [4色×3個]	400円
DENT.EX systema genki f	190		12	0.19	12個 [4色×3個]	400円
DENT.EX systema genki j	180		9.5	0.15	12個 [4色×3個]	400円

*スーパーターパード毛のため ※携帯に便利なキャップ付 ※価格には消費税は含まれておりません。

ライオン歯科材株式会社

〒111-8644 東京都台東区蔵前 1-3-28 TEL.03(6739)9012

ライオン歯科材 検索

<https://www.lion-dent.com>


株式会社モリタ

DENT. EX systema

genki genki f

「患者様は、コンパクトヘッド歯ブラシで上手く磨けていますか?」という質問に、すべての歯科医院で「上手く磨けない患者様がいらっしゃる」と回答*。そして、「上手く磨けない患者様」の割合は、実に48.9%*でした。

このような患者様には、「DENT.EX systema genki & genki f」をお薦めください。

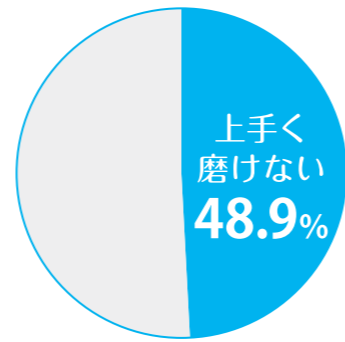

コンパクトヘッド歯ブラシで上手く磨けない患者様
*2007年3月歯科医院調査、13歯科医院


お薦めポイント

1 接触面積が広い、幅広ヘッド

長さ方向はコンパクトな幅広ヘッドのため、ブラッシングテクニックによらず、歯面から歯頸部・歯肉まで効率よくブラッシングできます。

2 歯頸部・歯間部に毛先がよく届く、スーパーテーパード毛

歯肉に与えるストレスを最小限に抑え、やさしく気持ちよいみがき心地です。

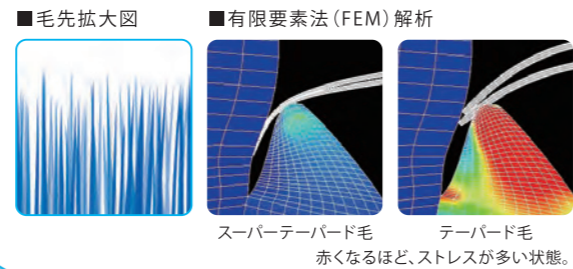



3 どんな握り方にも適した、太めの曲面グリップ

滑らかな曲面の太いグリップで、ペン、パームなど様々な握り方に対応できます。

genki j

仕上げみがきを卒業する混合歯列後期の9歳くらいから、親の目が届きにくく、また、まだ上手く磨けないため「歯肉炎」が急増。この年齢層は、「生活習慣・食生活の変化」、「ブラッシング意識の低さ」、「凸凹の複雑な歯並び」などの「歯肉炎リスク」をかかえています。

このような患者様には、「DENT.EX systema genki j」をお薦めください。

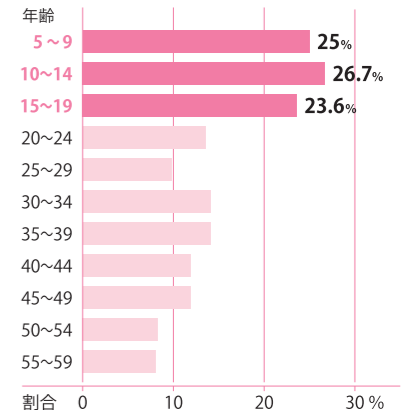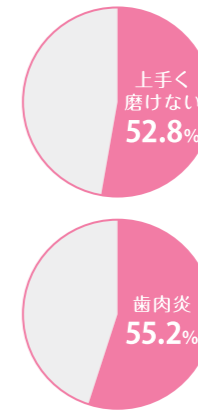


歯科医院に来院する9~15歳の上手く磨けない患者の割合と歯肉炎患者率
2009年9月歯科医院調査 (n=40)

フロアリング後の出血の認められた者の割合
平成23年歯科疾患実態調査(厚労省)

お薦めポイント


1 コンパクトでも接触面積が広い、幅広ヘッド

この年齢層の小さなお口に合わせたコンパクトな幅広ヘッドのため、ブラッシングテクニックによらず、歯面から歯頸部・歯肉まで効率よくブラッシングできます。

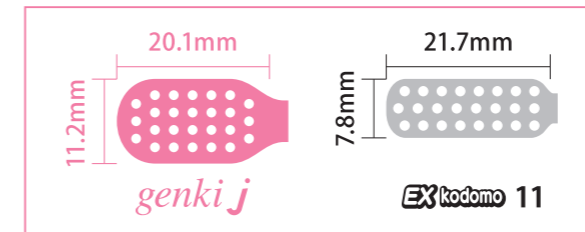

2 短めでソフトなスーパーテーパード毛で、歯肉にやさしいみがき心地

歯肉に与えるストレスを最小限に抑え、ブラッシング圧が高くなっても歯肉にやさしく歯肉炎ケアができます。

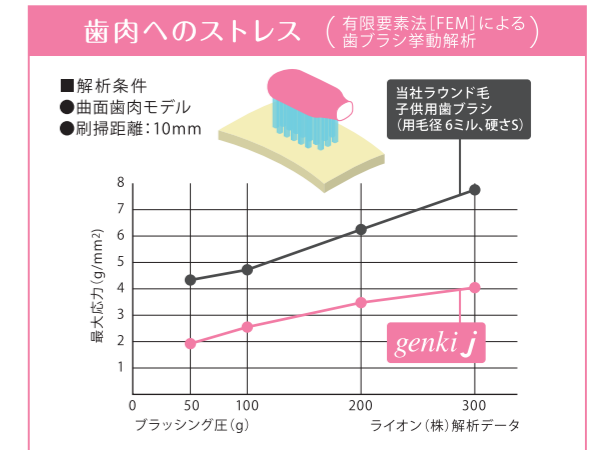

3 どんな握り方にも適した、太めの曲面グリップ

滑らかな曲面の太いグリップで、ペン、パームなど様々な握り方に対応できます。



genki / genki f の適用症例

コンパクトヘッド歯ブラシ使用	genki 使用
30代 男性 特に下顎の歯頸部、隣接面に磨き残しあり。	歯頸部のブラッシングに改善が見られた。
20代 女性 矯正ブラケットの周囲部にブラークの残存あり。	矯正ブラケットの周囲部の清掃状態が改善。

資料提供 埼玉県久喜市開業 フローラデンタルクリニック 市村 光 院長

genki j の適用症例

コンパクトヘッド歯ブラシ使用	genki j 使用6日後	コンパクトヘッド歯ブラシ使用	genki j 使用6日後
12歳 男性 唇面や下顎前歯間乳頭部に顕著にブラークが付着。	歯面や歯頸部が磨けるようになり、清掃状態が改善。	9歳 女性 唇面・歯頸部にびっしりとブラークが付着し歯間乳頭部に炎症。	大幅にブラークが減少し、特に歯頸部がきちんと磨けるようになった。

資料提供 山口県萩市開業 仁保歯科医院 仁保 俊昭 副院長