


口腔サイズに合わせて使いやすい
3つのgenkiをラインアップ

ヘッドの大きさと植毛配列
(実物大)

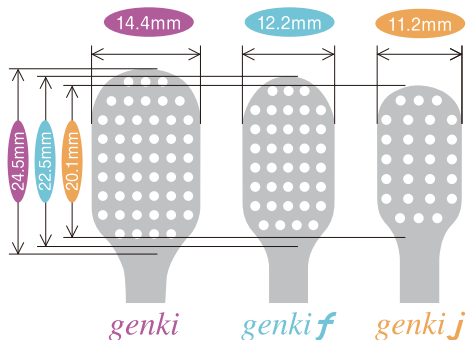

genkiシリーズの3つの特長

POINT 1 幅広ヘッド
 歯面
 +
 歯と歯ぐきの境目
 +
 歯ぐき
 広範囲を一気に磨けます!

POINT 2 全ての毛先がスーパーテーパード毛
 毛先拡大図
 ●毛先がすずみまで届きます
 ●やさしく気持ちよい磨き心地

POINT 3 太い曲面グリップ
 ●どんな持ち方でもラクに握れます
 ●しっかり手の中におさまる安定感
 携帯に便利な専用キャップ付き。

genki

歯の定期検診を受けましょう。

ライオン歯科材株式会社

2024.01.SO-A01



患者様用リーフレット

歯科用

幅広ヘッドの
「効率のよさ」と「心地よさ」できれいに

DENT. systema

genki シリーズ



毎日のブラッシングで困っている事はありますか？



小さなヘッドの
歯ブラシでは
上手く磨けない…




歯ぐきが腫れていて
ブラッシング
すると痛む…



歯みがきに時間を
かけられない…



手に力が入りにくく
歯ブラシを細かく
操作しにくい…

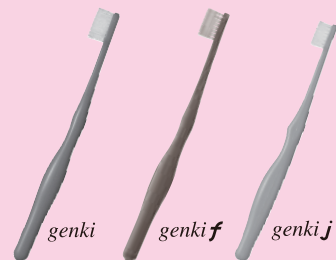

DENT. EX systema *genki* シリーズ

こんな方に



genki (原寸大)


ブラッシングの基本

1

歯と歯ぐきの境目 (歯頸部)

毛先を軽く当て、小刻みに動かします。

※強く押し付けると
毛先が開いて
上手に磨けません。

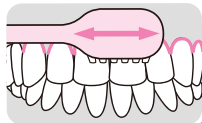

2

前歯の内側

歯ブラシを立て、
植毛部のつま先や
かかとの部分を当て、
上下に細かく
動かします。



3

奥歯の内側

奥歯の内側は、歯面や、
歯と歯ぐきの境目に
毛先を当てて細かく
前後に動かします。

