

インプラントの機能を 長く維持するために

噛むほど丈夫になるインプラント


インプラントを入れ、あごの骨に噛む力がかり始めると、噛むことに順応してインプラントを支えている骨の新陳代謝が進み、インプラントの噛む能力は成長します。

インプラント周囲炎にご注意を

インプラントも日常のケアを怠ると歯垢や歯石が付くのは天然歯と同じです。放っておくと「インプラント周囲炎」になり、最後には抜けてしまうこともありますので注意が必要です。

インプラント寿命を延ばすケア

磨き残しのチェックや正しい歯ブラシの当て方、口腔状況に合わせたケア用品の使用方法などを歯科医院で指導を受け、それに従ってセルフケアを行うことが大切です。

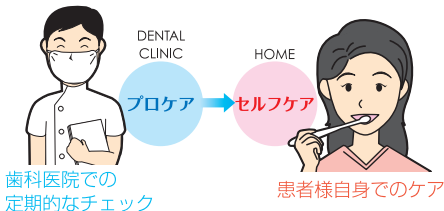

〈就寝前のインプラントケア〉

寝ている間は唾液の分泌が減り、細菌が繁殖しやすいので、Systema 薬用歯間ジェルでのケアを追加してください。

- ケア用品：DENT.EX ImplantCare-OTまたはDENT.EX 歯間ブラシ Systema 薬用歯間ジェル Systema 薬用デンタルリンス

使用方法

- ①デンタルリンス適量(約10ml)を口を含み20秒ほどすぎます。
- ②Systema 薬用歯間ジェルをDENT.EX ImplantCare-OTにつけブラッシングするか、DENT.EX 歯間ブラシにつけて歯間清掃を行います。

◆インプラントのケア用品◆

Systema 薬用デンタルリンス・ノンアルコールタイプ



【医薬部外品】【液体歯磨】販売名:デントシステマデンタルリンスNfa
インプラントの歯頸部や天然歯の歯周ポケットに入りこみ、歯周病を予防。刺激の少ないノンアルコールタイプ。

Systema 薬用歯間ジェル



【医薬部外品】販売名:システマジェルFa
歯間ケアに効果を発揮するジェルタイプの歯周病予防ハミガキ剤。

DENT.EX 歯間ブラシ



歯間サイズに合わせたタイプでワイヤーが折れにくく奥歯にも使いやすいL字型歯間ブラシ。

DENT.EX ウルトラフロス



フロッシング習慣のない方にも使いやすいY字型ホルダーのデンタルフロス。

DENT.e-floss



唾液に触れると糸がスポンジ状に膨らみ、効果的にプラークを除去。

※歯周病は歯肉炎・歯周炎の総称です。

ライオン歯科材株式会社

2021.05.S0-A08



患者様用リーフレット


歯科用

LION

インプラントケア

DENT. EX ImplantCare

インプラントのセルフケアに

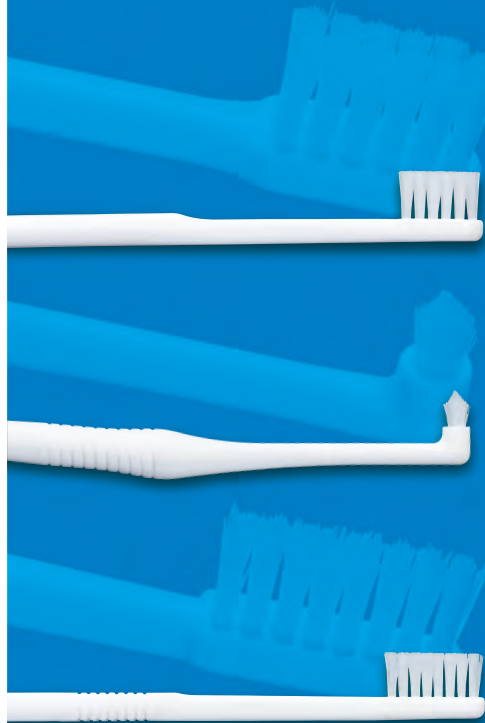

インプラント手術後から
治療後のお手入れまで、
すべての使用環境をカバーする
3タイプの歯ブラシ。

1次手術直後・抜糸後のケアに

DENT. EX ImplantCare-US

毛が柔らかく歯肉にやさしい植毛で、手術後のデリケートな歯肉、隣在歯のケアに適した歯ブラシ。



(ウルトラソフトタイプ)

インプラントの毎日のケアに

DENT. EX ImplantCare-OT

歯ブラシが届きにくい、磨き残しの多い部位の清掃に適したワンタフトタイプの歯ブラシ。



(ワンタフトタイプ)

インプラントの毎日のケアに

DENT. EX ImplantCare-TR

二列植毛で歯と歯ぐきの境目に毛先が当たるのを確認しやすく、ケアの習慣づけに適した歯ブラシ。



(二列タイプ)

インプラントのセルフケア

インプラント手術は、「2回法」(人工歯根を埋める1次手術、歯を装着する2次手術)と、これらを1回で行う「1回法」があります。ここでは「2回法」を例にケアの方法をご紹介します。

1次手術後のケア

手術直後のケア

1次手術後の歯肉や縫合糸は細菌が付きやすく、清潔に保つ必要があります。


●ケア用品: DENT. EX ImplantCare-US
Systema 薬用デンタルリンス・ノンアルコールタイプ

ポイント

口腔内のケアには、刺激の少ないノンアルコールタイプのデンタルリンスが適しています。傷口への刺激も少なく、薄めずそのまま手軽に使用でき、インプラント部だけでなく、口腔内の殺菌・清掃に効果的です。

使用方法

- ①デンタルリンス適量(約10ml)を口に含んで20秒ほどすすぎます。
- ②柔らかな植毛の歯ブラシで縫合部は避けながらブラッシングします。

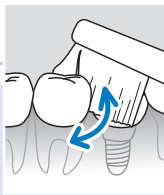

抜糸後のケア

傷口がふさがった縫合部を刺激しないよう、口腔内の清掃を行います。


●ケア用品: DENT. EX ImplantCare-US, OT
Systema 薬用デンタルリンス・ノンアルコールタイプ

ポイント

抜糸後の歯肉、周りの歯の清掃は、柔らかな毛の歯ブラシでやさしく磨きます。

使用方法

- ①デンタルリンス適量(約10ml)を口に含み20秒ほどすすぎます。
- ②DENT. EX ImplantCare-USでブラッシングします。

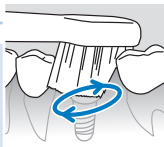

抜糸の傷が癒えたら

手術前と同じようにケアしてください。


2次手術後のケア

インプラントを健康で長持ちさせるために、毎食後ケアを行う習慣をつけましょう。


●ケア用品: DENT. EX ImplantCare-TR
DENT. EX ImplantCare-OT
DENT. EX 歯間ブラシ、DENT. EX ウルトラフロス
DENT. e-floss、Systema 薬用デンタルリンス

使用方法

- ①デンタルリンス適量(約10ml)を口に含み20秒ほどすすぎます。
- ②DENT. EX ImplantCare-TRを歯と歯肉の境目にあて、左右に小刻みに動かしながら、インプラント部を中心に1歯ずつ丁寧に磨きます。

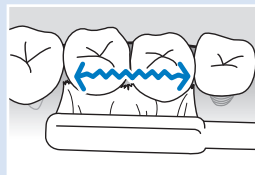

- ③TRの毛先が入りにくい部分にはDENT. EX ImplantCare-OTを使います。歯と歯肉の境目に先端を押し込むように当て、なぞるように細かく振動させながらプラークを浮かせて除去します。

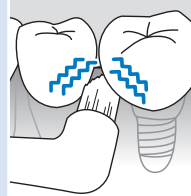

- ④さらに狭い歯間部はDENT. EX 歯間ブラシ、歯と歯の隣接面はDENT. EX ウルトラフロスやDENT. e-flossで清掃します。