



歯周ケア歯ブラシのスタンダード®
Systema
※当社内

システム 42M・42H・44M・44H

ヘッドサイズと刷掃力で選べる4タイプ




コンパクトヘッド

44M



コンパクトヘッド
 (刷掃力強化タイプ)

44H

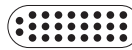

レギュラーヘッド

42M



レギュラーヘッド
 (刷掃力強化タイプ)

42H



ハンドルカラー



詳しい商品情報は
 こちらから



歯の定期検診を受けましょう。

ライオン歯科材株式会社

歯周ケア歯ブラシのスタンダード®
Systema
※当社内

システム 42M・42H・44M・44H



歯ぐきにやさしく、狭いすき間に届く
 スーパーテーパード毛

LION

歯ぐきにやさしい
 スーパーテーパード毛だから
 ブラッシング&マッサージ。



しっかり



歯周ケアのポイントは、炎症の原因となるプラークをしっかり落とすことと、歯ぐきのマッサージ。スーパーテーパード毛のSystemaなら、歯ぐきへのストレスが少なく、すみずみまでブラッシング&マッサージできます。

製品特長

Point. 1

スーパーテーパード毛

- 1) 歯と歯ぐきの境目など細かい所に届く超極細の毛先
- 2) 歯ぐきにやさしく気持ちよい磨き心地

Point. 2


ストレートハンドル

持ちやすく、毛先コントロール性にすぐれます

Point. 3


5色のハンドルカラー

カラフルで幅広い年代に支持されます

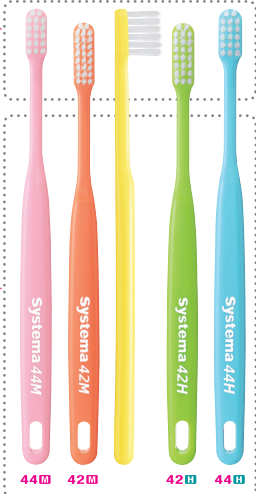

オーラルケアに欠かせないブラッシング
3つの基本

1 毛先を歯面や歯と歯ぐきの境目にきちんと当てる。

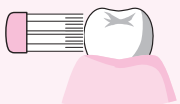

2 毛先が広がらないくらいの軽い力で。スーパーテーパード毛は、軽い力で毛先を有効に使えます。




3 小刻みに動かして1~2本ずつ(5~10mmが目安)。



歯科医院で、デンタルフロスや歯間ブラシの使い方、ブラッシング指導を受けて、お口の状態に合ったブラークコントロールを行いましょう。

毛先が開いたら、歯ブラシを交換しましょう。

毛先が開くと、ブラークを効率的に取り除けなくなります。

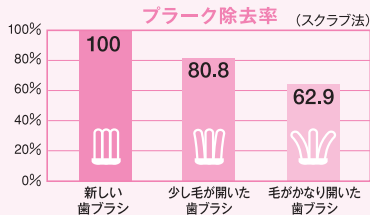


参考資料：武者良憲ら、歯ブラシ植毛部の状態による歯垢除去効果の比較、歯科衛生士 11(11):24.1987.
※新しい歯ブラシを100としてグラフ再構成

磨きにくい部位、磨き残しの多い部位をきちんと意識して、しっかりケア!



毛先が届きにくく、ブラークの残りやすい部位

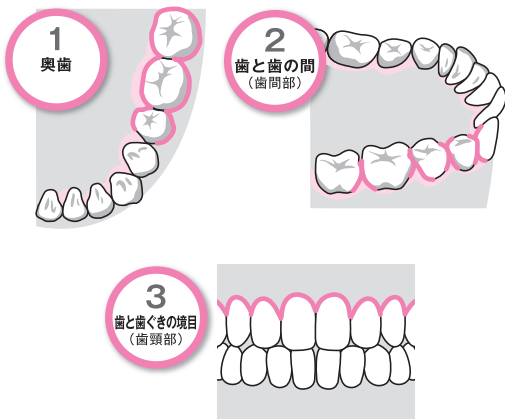

歯ぐきもマッサージ

歯を磨くのと同時に、歯ぐきにも歯ブラシの毛先が当たるようにブラッシングし、歯ぐきの表面をマッサージしましょう。歯ぐきを傷つけないよう、毛先が広がらない程度の軽い力でいきましょう。


毛先が極細のスーパーテーパード毛のSystemaは、歯ぐきにやさしくマッサージできます。

定期的に歯科医院でチェックを受けましょう。

部位別の磨き方

1 歯と歯ぐきの境目 (歯頸部)

毛先を軽く当て、小刻みに動かします。※強く押し付けると毛先が開いて上手に磨けません。

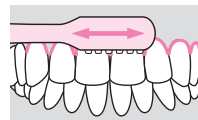


2 前歯の内側

歯ブラシを立て、植毛部のつま先やかかとの部分を当て、上下に細かく動かします。



3 奥歯の内側


奥歯の内側は、歯面や歯と歯ぐきの境目に毛先を当てて細かく前後に動かします。

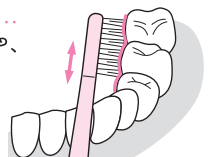

4 奥歯の後側

歯ブラシを横から入れ、植毛部の先端を当てて磨きます。

ヘッドの小さな歯ブラシだと、より届かせやすくなります

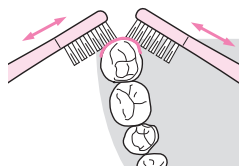

頬側・舌側の両方から磨きます。