

歯ぐきにやさしい
スーパーテーパード毛だから、
しっかりブラッシング&マッサージ。




歯周ケアのポイントは、炎症の原因となるプラークをしっかり落とすことと、歯ぐきのマッサージ。スーパーテーパード毛のSystema AXなら、歯ぐきへのストレスが少なく、すみずみまでブラッシング&マッサージができます。

製品特長

Point.1 超薄型コンパクトヘッド

お口の中すみずみまで動かしやすい

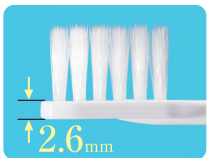

Point.2 スーパーテーパード毛


- 1) 歯と歯ぐきの境目など細かい所に届く超極細の毛先
- 2) 歯ぐきにやさしく気持ちよい磨き心地

Point.3 ロング&スリムネックのストレートハンドル

お口の中すみずみまで毛先をコントロールしやすい

Point.4 ソフトラバー付き曲面グリップ

滑りにくく握りやすい

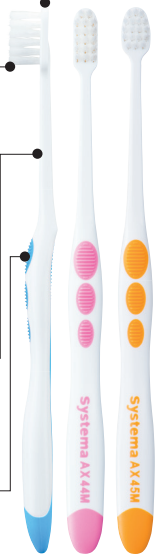

44H 44M 45M

一歩進んだ歯周ケアのために。

システム エーエックス

Systema AX

ヘッドサイズと刷掃力で選べる3タイプ



超薄型コンパクトヘッド

44M



超薄型コンパクトヘッド

(刷掃力強化タイプ)

44H



超薄型&
超コンパクトヘッド

45M



ハンドルカラー

ブルー オレンジ グレー ピンク

詳しい商品情報は
こちらから



歯の定期検診を受けましょう。

ライオン歯科材株式会社



患者様用リーフレット

歯科用

一歩すすんだ歯周ケアに

Systema AX

システム エーエックス 44M・44H・45M



超薄型ヘッド×スーパーテーパード毛で、
口腔内すみずみまで毛先がらくらく届く

LION

オーラルケアに欠かせないブラッシング

3つの基本

1

毛先を歯面や
歯と歯ぐきの境目に
きちんと当てる。



2

毛先が広がらない
くらいの軽い力で。

スーパーテーパード毛は、
軽い力で毛先を有効に
使えます。



3

小刻みに動かして
1~2本ずつ
(5~10mmが目安)。




歯科医院で、デンタルフロスや歯間ブラシの使い方、
ブラッシング指導を受けて、お口の状態に合った
ブラークコントロールを行いましょう。

毛先が開いたら、歯ブラシを交換しましょう。

毛先が開くと、ブラークを効率的に取り除けなくなります。

ブラーク除去率 (スクラブ法)

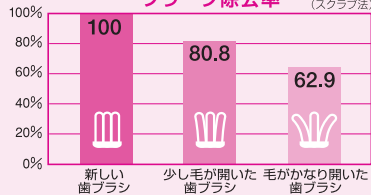


参考資料：武者良恵ら、歯ブラシ植毛部の状態による
歯垢除去効果の比較、歯科衛生士 11(11): 24,1987.
※新しい歯ブラシを100としてグラフ再構成


磨きにくい部位、磨き残しの多い部位を きちんと意識して、しっかりケア!



頬粘膜や舌の影響で ブラッシングしにくい部位

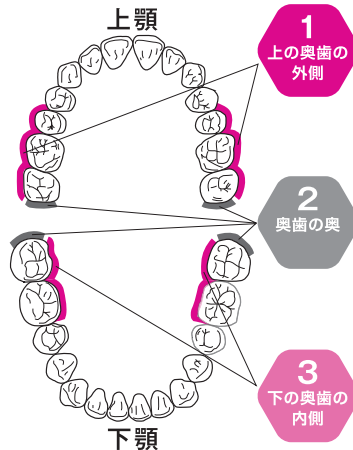

毛先が届きにくく、 プラークの残りやすい部位

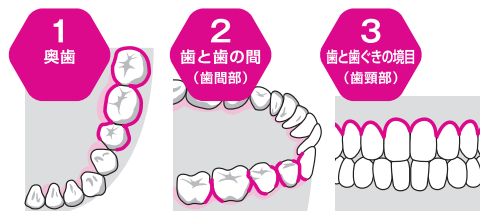


部位別の磨き方

1

歯と歯ぐきの境目 (歯頸部)

毛先を軽く当て、
小刻みに動かします。
※強く押し付けると毛先が開いて
上手に磨けません。

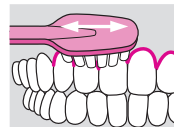

2

前歯の内側


歯ブラシを立て、
植毛部のつま先や
かかとの部分を当て、
上下に細かく
動かします。



3

奥歯の内側

奥歯の内側は、歯面や、
歯と歯ぐきの境目に
毛先を当てて細かく
前後に動かします。

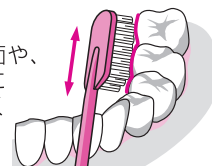


4

奥歯の後側

歯ブラシを横から入れ、植毛部の先端を
当てて磨きます。

ヘッドの小さな歯ブラシだと、
より届かせやすくなります

システムAX 45M

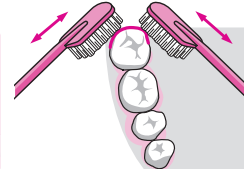

頬側・舌側の両方から磨きます。