


●歯周病・むし歯になりやすい歯間部のケアにはデンタルフロスが効果的です。

■歯間部のブラーク除去率

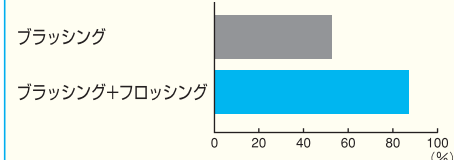

引用文献：山本他、日本歯周病学会誌、17：258,1975

毎日のフロッシング習慣にぴったり。
こんなときこそ“ウルトラフロス”！

ウルトラフロスなら簡単・確実に歯間清掃ができます！

●お子さまのフロッシング習慣の育成に



●歯と歯の間のむし歯予防に



●白歯部（奥歯）のフロッシングに



●歯周病ケアに

●歯間部歯肉溝の清掃に

歯間清掃用具

DENT. EX ウルトラフロス

もっと簡単に、もっと確実に。
フロッシングが初めての方、
苦手な方の歯間清掃をサポート。

特長

- テクミロン™を採用。高機能で切れにくく、繰り返し使えます。歯ブラシと同様に、水洗いして繰り返し使えます。
- 使いやすさを追求したY字型ホルダー。
- フロスの太さで選べる2タイプ&豊富なカラーバリエーション。



S 狭い歯間用(細めタイプ)



S3
黄緑
オレンジ
ピンク 各1本



S10
ペパーミント
黄緑
黄
オレンジ
ピンク 各2本

M 一般歯間用(普通タイプ)



M3
水色
紺
紫 各1本



M10
白
水色
青
紺
紫 各2本

DENT.EXウルトラフロス S3 / S10

DENT.EXウルトラフロス M3 / M10

ライオン歯科材株式会社

2019.04.S0-A18



患者様用リーフレット

歯科用



狭い歯間用
(細めタイプ)

今日から始める“かんたん”フロッシング習慣。

DENT. EX ウルトラフロス

の使い方



LION

一般歯間用
(普通タイプ)


DENT. ~~EX~~ ウルトラフロスの使い方

歯ブラシの毛先が届きにくい歯間部は歯周病やむし歯になりやすい部位です。
簡単・確実なウルトラフロスで毎日のフロッシング習慣、はじめましょう。

1. 挿入




フロスが通りにくい歯と歯の間が狭いところ（コンタクトポイント）は、フロスをゆっくり横にスライドさせながら通過させます。

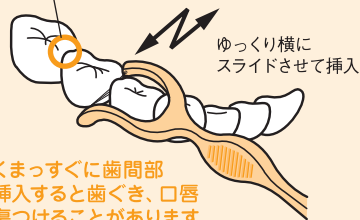

- 強くまっすぐに歯間部に挿入すると歯ぐき、口唇を傷つけることがあります。
- コンタクトが狭くM(普通タイプ)が挿入しにくい場合にはS(細めタイプ)をご使用ください。

2. 歯面の清掃

隣り合った歯を1歯ずつフロッシング。
フロスを歯面に押しつけるようにしながら上下に動かし、プラークをこすり取ります。

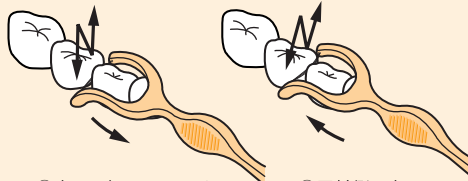

- ①歯面に押しつけるように、押しつけたまま、上下に動かす。
- ②反対側の歯面に押しつけるように、押しつけたまま、上下に動かす。

- 歯間部は必ず両側を清掃しましょう。
- ヌルヌルした感じがギシギシした感じになるまで。

3. 歯肉溝の清掃

歯と歯ぐきの境い目にある溝（歯肉溝）にもプラークがついています。歯ぐきを傷つけないよう、ゆっくり動かしてこすり取ります。



- 歯肉の下の清掃は、歯科医師・歯科衛生士の指導にしたがって行いましょう。
- フロスを抜くときも横にゆっくりスライドさせながら抜いてください。

ご注意

1. 歯科医師・歯科衛生士の指導のもとにお使いください。
2. フロスがすべりにくい、すぐ切れる場合は、金属歯冠やむし歯などの部位に原因があるおそれがあります。
歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。
3. フロスによって歯の充填物や歯冠が外れた場合は、外れた充填物等を保存して歯科医師にご相談ください。
4. フロスを勢いよく挿入、又は引き抜くと、歯ぐきや口唇等を傷つけることがありますので、ゆっくりと行ってください。

◎さらに効果的にお使いいただくために

ウルトラフロスにDENT.チェックアップ フォーム（研磨剤無配合のフッ化物配合歯磨剤）をのせて清掃すると歯間部のむし歯予防に効果的です。

